

Autoclave CLINOCLAV AH-21 S2 DRY



AH-21 S2 DRY




Imprimante optionnelle

Avantages:

- Touches de fonction
- Imprimante externe (optionnelle).

Courbe de stérilisation

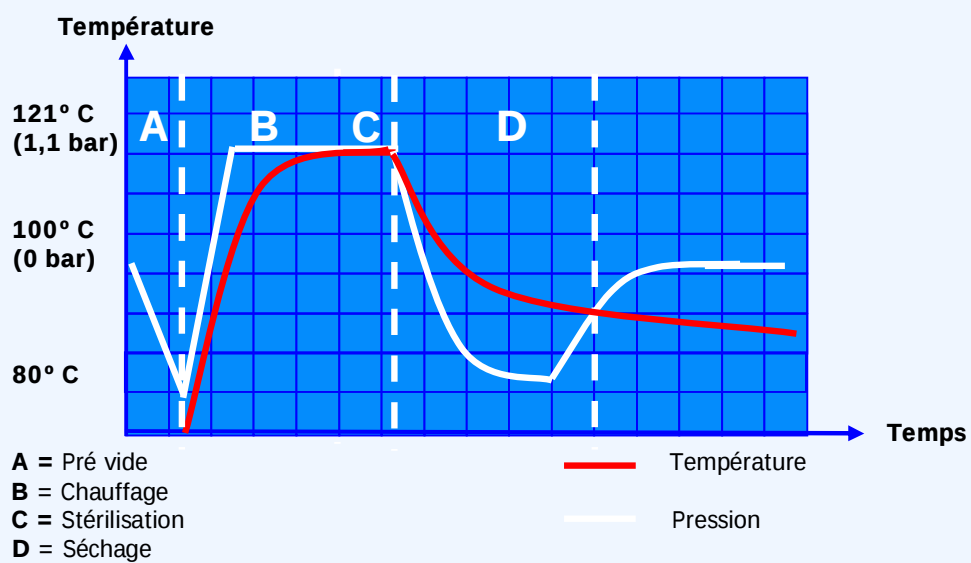

Autoclaves

Autoclave CLINOCLAV AH-21 S2 DRY

Applications:

Utilisé pour la stérilisation de: Matériel solide emballé et non emballé, matériel poreux type B (des cavités légèrement profondes et larges, verre, plastique, objets métalliques, sac de déchets, etc.

Caractéristiques:

- Pré-vide avant la stérilisation et pompe à vide pour le séchage
- Contrôlé par microprocesseur: Température, cycle et purge.
- Réservoir d'eau pour l'alimentation de l'autoclave (4,5 litres).
- Remplissage automatique de la chambre de stérilisation.
- Port de connexion RS-232 pour imprimante.

Sécurité:

Soupape et thermostat de sécurité


Dispositif empêchant l'ouverture du couvercle tant que la chambre est sous pression

Interrupteur niveau de sécurité

Détecteur d'ouverture du couvercle

Livré complet avec les accessoires suivants:

- Un support pour quatre plateaux
- Trois plateaux perforés en acier inoxydable (*Réf. BAH-21*)
- Une pince pour retirer les plateaux
- Un tuyau flexible avec connecteur pour vider le réservoir d'eau
- Un support pour sachets de stérilisation
- Plateau auxiliaire

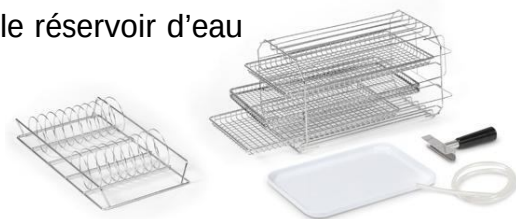

Référence	Capacité	Ø x H.	H x L x P en cm	Temp. °C	Max. bar	Puissance W	Poids Kg.	Rang de temps
AH-21 S2 DRY	21 L	25 x 43 cm	42,5 x 59 x 68	100-135	2,2	2.000	55	3 a 180 min.

Autoclave Clinoclav AH-21 S2 DRY

Accessoires



Imprimante de table

Imprime le numéro du programme, cycle, la température, la date et heure de chaque stérilisation.
Les messages d'erreur sont aussi affichés

Référence: ITS



Ruban de contrôle de stérilisation

Rouleau de ruban adhésif pour le contrôle de stérilisation.

Référence: TEST-CT



Autoclaves